

Deutsch

iCare HOME2

iCare HOME2
Kurzanleitung

Kurzanleitung

icare



Lesen Sie diese Kurzanleitung und sehen Sie sich die Videoanweisungen HOME2 an, bevor Sie das Tonometer verwenden. Befolgen Sie die Anweisungen Schritt für Schritt.



Lesen Sie die Sicherheitsinformationen in Kapitel 1 der Gebrauchsanweisung, bevor Sie das Tonometer verwenden.

Wenden Sie sich an Ihr medizinisches Fachpersonal, wenn Sie Hilfe bei der Verwendung von iCare HOME2 benötigen.



VORSICHT! Bevor eine Messung durchgeführt wird, aktualisieren Sie die Uhrzeit des Tonometers manuell auf Ihre lokale Uhrzeit oder automatisch durch Anschließen des Tonometers an die iCare PATIENT2-App oder die iCare EXPORT-Software.




Schritt

Seite


- | | | |
|----------|---|----|
| 1 | Einsetzen der Batterien | 5 |
| 2 | Einsetzen des Messgebers | 6 |
| 3 | Einschalten | 7 |
| 4 | Richtige Messposition | 8 |
| 5 | Einstellung der Stützen und Positionierung des Tonometers | 9 |
| 6 | Messung des Augendrucks | 11 |
| 7 | Messung des Augendrucks in der Rückenlage | 13 |
| 8 | Problembehandlung | 15 |
| 9 | Ausschalten des Tonometers und Entsorgen des Messgebers | 17 |

Tonometer-Teile


4

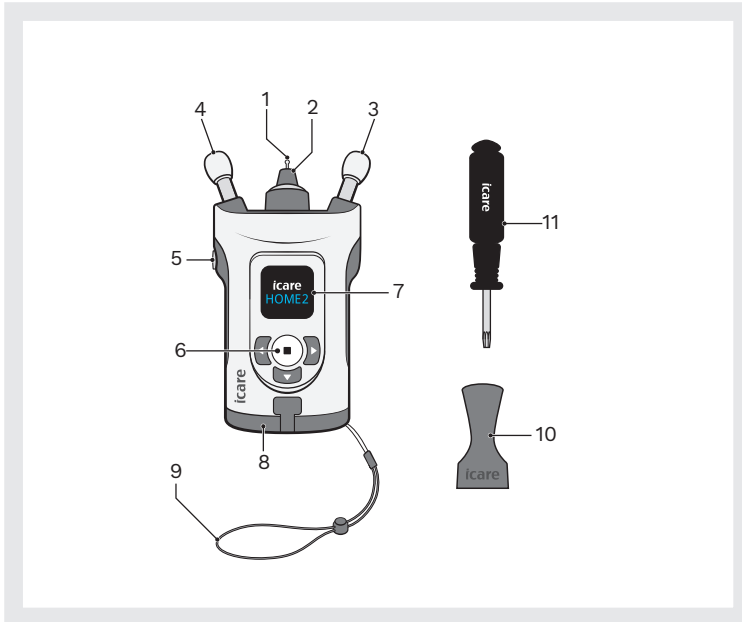


- 1 Messgeber
- 2 Messgebereinsatz
- 3 Wangenstütze
- 4 Stirnstütze
- 5 Messtaste
- 6 Auswahl Taste
- 7 Anzeige
- 8 Batteriefachdeckel
- 9 Armband
- 10 Messgeberapplikator
- 11 Schraubendreher TX8

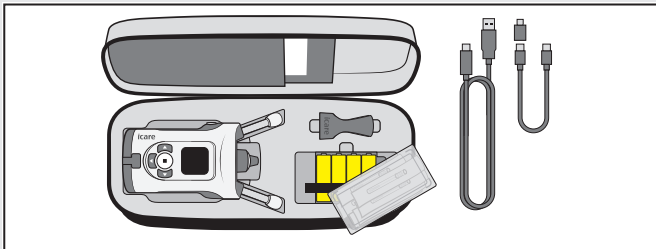


Die Batterien befinden sich im Tragekoffer des Tonometers unter dem Messbergehäuse.

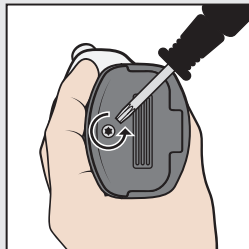


Öffnen Sie den Batteriefachdeckel mit einem Schraubendreher.

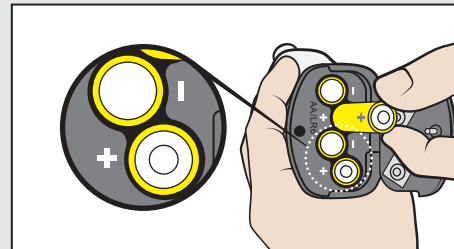


Setzen Sie die Batterien ein und schließen Sie den Deckel.

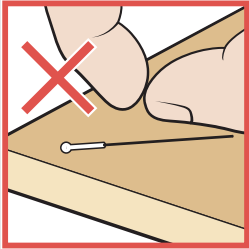


Verwenden Sie den Messgeber nicht, wenn er mit der Hand, dem Tisch oder einer anderen nicht sterilen Oberfläche in Kontakt gekommen ist.

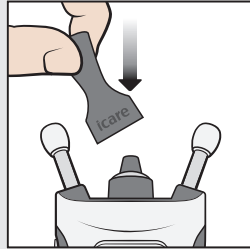

Setzen Sie den Messgeberapplikator auf den Messgebereinsatz.

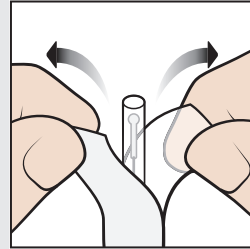


Öffnen Sie die Verpackung.

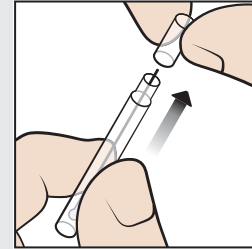


Entfernen Sie die Kappe.





WARNUNG! Bewahren Sie nicht verwendete Messgeber in ihrem Behälter auf, um Kontamination zu vermeiden. Berühren Sie den ungeschützten Messgeber nicht. Verwenden Sie den Messgeber nicht, wenn er eine nicht sterile Oberfläche wie den Tisch oder den Boden berührt hat.

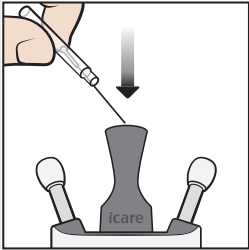

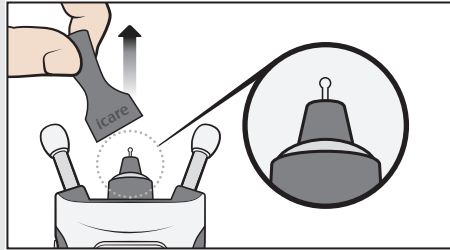


Lassen Sie den
Messgeber vom
Behälter in den
Messgeberapplikator
fallen.


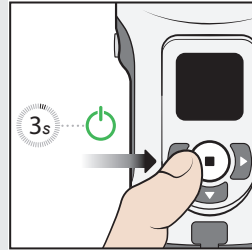
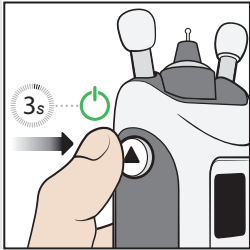


Entfernen Sie den
Messgeberapplikator.



Drücken Sie  nach unten, bis Sie einen Signalton hören. Auf der Anzeige wird der Text „Start“ angezeigt.

Alternativ können Sie  nach unten drücken, bis Sie einen Signalton hören. Drücken Sie dann erneut auf , um in den Messmodus zu gehen. Auf der Anzeige wird der Text „Start“ angezeigt.

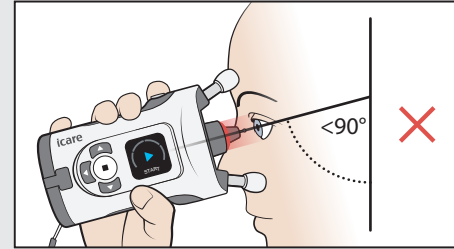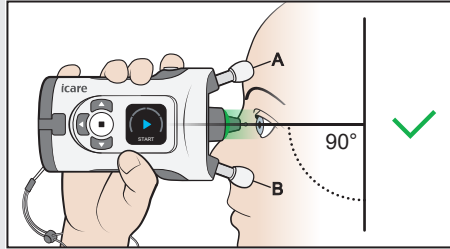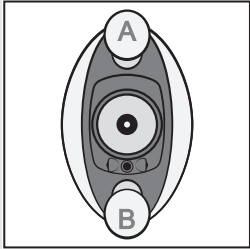


Die Stirnstütze A ruht an Ihrer Stirn und die Wangenstütze B ruht an Ihrer Wange.


Sehen Sie geradeaus. Das Tonometer befindet sich in einem Winkel von 90 Grad zu Ihrem Gesicht. Der Messgeber befindet sich etwa 5 mm von Ihrem Auge entfernt und zeigt im rechten Winkel zur Mitte des Auges.

Wenn das rote Licht am Messgebereinsatz leuchtet, ist das Tonometer zu stark nach unten geneigt. Setzen Sie sich aufrecht hin und heben Sie Ihr Kinn an.


Die Positionierung des Tonometers wird im folgenden Abschnitt erläutert.

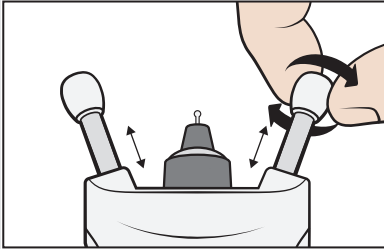

Stellen Sie die richtige Länge der Stirn- und Wangenstützen ein, bevor Sie messen. Beginnen Sie mit der Einstellung der Stützen bei maximaler Länge.

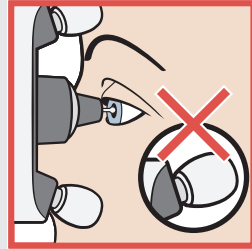


Verkürzen Sie die Stützen mit jeweils nur zwei Klicks, um zu verhindern, dass das Tonometer zu nah an Ihr Auge kommt.

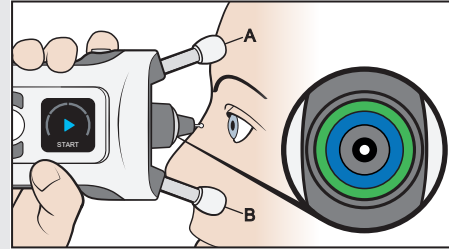


Positionieren Sie das Tonometer vor Ihrem Gesicht und sehen Sie in den Messgebereinsatz. Wenn der blaue und der grüne Ring im Messgebereinsatz symmetrisch sind, zeigt der Messgeber im rechten Winkel zur Mitte des Auges.




WARNUNG! Nur der Messgeber darf das Auge berühren. Berühren Sie das Auge nicht mit anderen Teilen des Tonometers. Stoßen Sie mit dem Tonometer nicht an das Auge.

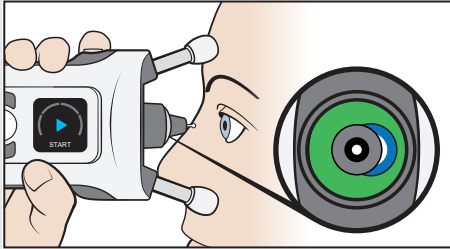


Wenn die Ringe nicht symmetrisch sind, zeigt der Messgeber nicht im rechten Winkel zur Mitte des Auges. Korrigieren Sie die Position des Tonometers.

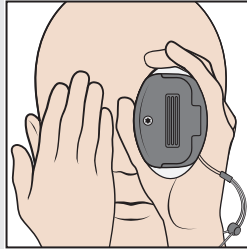


Halten Sie beide Augen geöffnet. Wenn Sie das nicht getestete Auge abdecken, sind die Lichtringe klarer zu sehen.

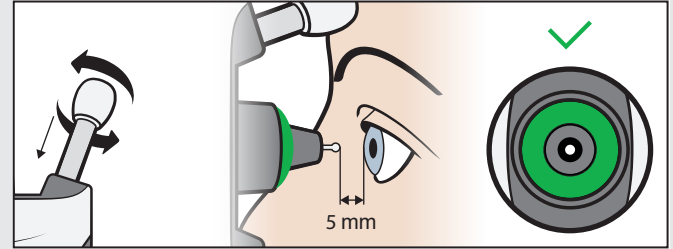


Verkürzen Sie die Stützen, indem Sie sie mit jeweils zwei Klicks im Uhrzeigersinn drehen, bis Sie nur noch einen symmetrischen grünen Ring sehen. Das Tonometer hat jetzt den richtigen Abstand zum Auge.

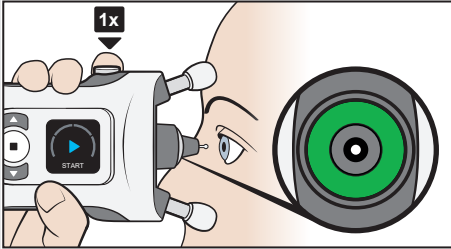


Beginnen Sie mit der Messung, wenn Sie nur einen symmetrischen grünen Ring sehen. Drücken Sie die Messtaste (▶) einmal. Der Messgeber berührt Ihr Auge leicht.

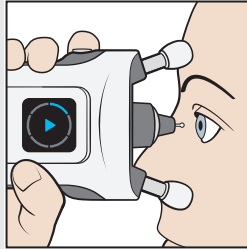


Ein einzelner Signalton zeigt an, dass die Messung erfolgreich war. Setzen Sie die Messung fort, bis Sie einen langen Signalton hören und sich das Licht im Messgeber ausschaltet.

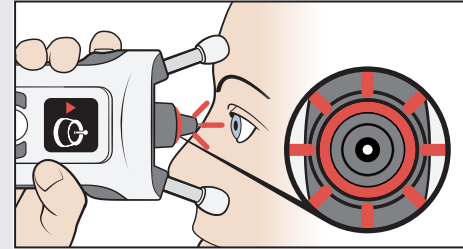


Wenn der Messgebereinsatz rot blinkt und Sie mehrere Signaltöne hören, war die Messung nicht erfolgreich. Siehe **Fehlersuche** auf Seite 17.

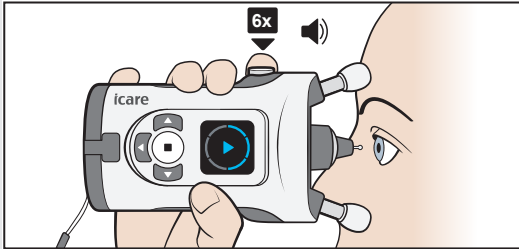



Eine Messsequenz besteht aus sechs Messungen.


Tipp: Sie können die Messsequenz auch beginnen, indem Sie die Messtaste  gedrückt halten, bis alle sechs Messungen durchgeführt wurden.

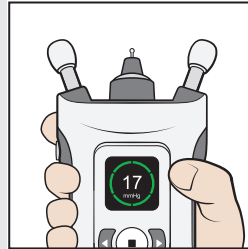


Nachdem alle sechs Messungen durchgeführt wurden, hören Sie einen langen Signalton, das Licht im Messgebereinsatz schaltet sich aus und die Ergebnisse werden auf der Anzeige angezeigt.

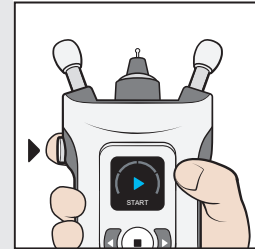


Drücken Sie die Messtaste  einmal und wiederholen Sie die Messung am anderen Auge.

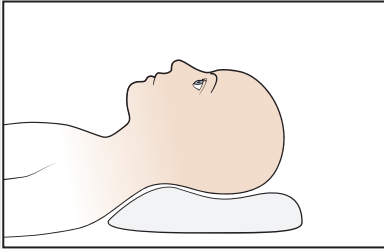


Liegen Sie einen Moment ruhig, bevor Sie messen.

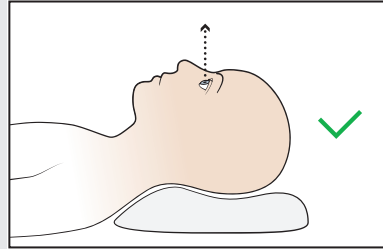


Nehmen Sie eine bequeme Position in Rückenlage ein und stützen Sie Ihren Hals mit einem Kissen. Sehen Sie geradeaus.

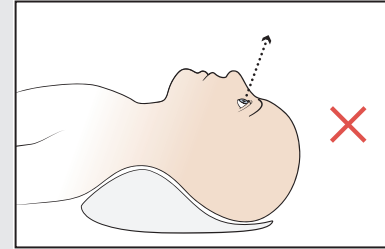


Beugen Sie den Kopf nicht nach hinten.

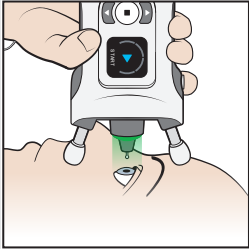


Setzen Sie das Tonometer in einem Winkel von 90 Grad auf Ihr Gesicht und messen Sie wie oben erklärt.

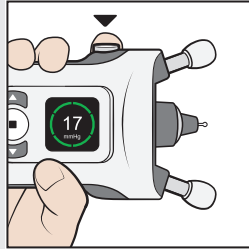



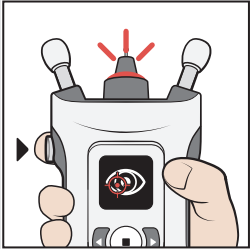














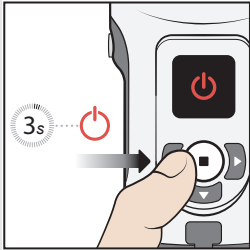
Nach der erfolgreichen Messung drücken Sie die Messtaste (▶) einmal und wiederholen Sie die Messung am anderen Auge.




Wenn ein Fehler aufgetreten ist, blinkt der Messgeber-einsatz rot. Die Anzeige und die Töne geben die Fehlerquelle an.

Sehen Sie auf die Anzeige, drücken Sie die Messtaste  einmal, korrigieren Sie notfalls und wiederholen Sie die Messung.

Symbol	Anzeigetext	Ton	Problem	Lösung
	ZU WEIT	3 lang 	Der Messgeber ist zu weit vom Auge entfernt.	Drücken Sie die Messtaste  einmal, um den Fehler zu quittieren. Verkürzen Sie die Stirn- und Wangenstützen.
	ZU NAH	5 kurz 	Der Messgeber ist zu nah am Auge.	Drücken Sie die Messtaste  einmal, um den Fehler zu quittieren. Verlängern Sie die Stirn- und Wangenstützen.
	FALSCHER AUSRICHTUNG	2 kurz 	Der Messgeber war nicht im rechten Winkel zur Hornhaut oder der Messgeber hat ein Augenlid oder Wimpern berührt.	Drücken Sie die Messtaste  einmal, um den Fehler zu quittieren. Positionieren Sie den Messgeber so, dass er im rechten Winkel zur Mitte des Auges zeigt. Halten Sie das Auge richtig geöffnet.
	WIEDERHOLEN	2 kurz 	Es ist ein Problem aufgetreten, weil der Messgeber bewegt wurde.	Drücken Sie die Messtaste  einmal, um den Fehler zu quittieren. Wiederholen Sie die Messung.
	ERKENNUNGSFEHLER	2 kurz 	Der Sensor kann das gemessene Auge (rechts oder links) nicht erkennen.	Drücken Sie  und dann  , bis das korrekte Auge (rechts oder links) auf der Anzeige zu sehen ist. Drücken Sie  oder die Zurücktaste, um die Messung abzubrechen.




Halten Sie die Auswahltaste (■) gedrückt, bis Sie drei Signaltöne hören und die Anzeige ausgeschaltet wird.

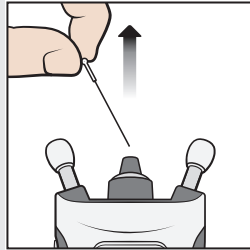

Entfernen Sie den Messgeber und legen Sie ihn zurück in den Messgeberbehälter.



Entsorgen Sie den Messgeber und den Behälter in einem Mischabfallbehälter.

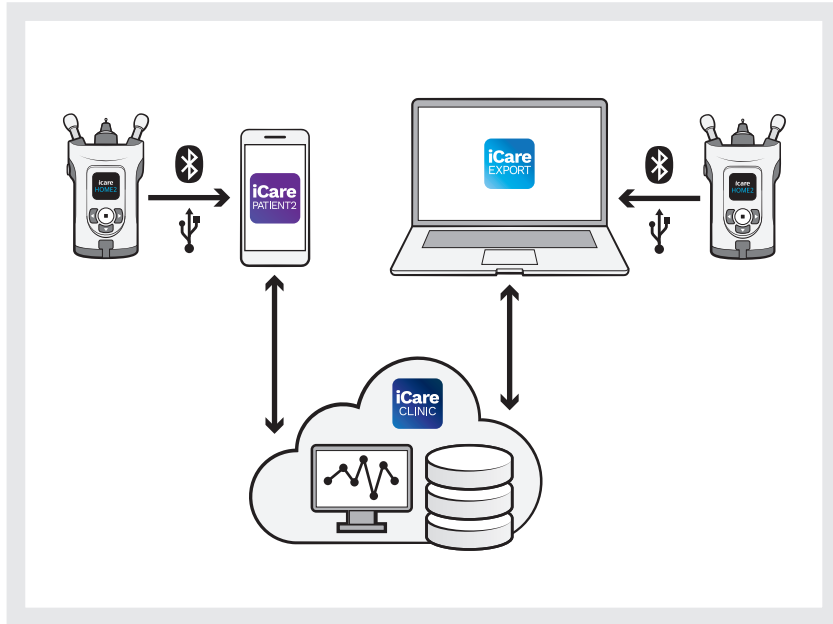

Mit der App iCare PATIENT2 auf Ihrem mobilen Gerät oder der Software iCare EXPORT auf Ihrem Computer können Sie Ihre Messergebnisse auf das iCare CLINIC-Konto Ihres Arztes oder auf Ihr persönliches iCare CLOUD-Konto übertragen.



Icare Finland Oy

Äyritie 22

01510 Vantaa, Finland

Tel. +358 9 8775 1150

info@icare-world.com

www.icare-world.com



Weitere Informationen finden Sie
in der Gebrauchsanweisung.



icare

iCare ist ein eingetragenes Warenzeichen von iCare Finland Oy. Icare Finland Oy Icare USA Inc. und iCare World Australia Pty Ltd und Centervue S.p.A. sind Teil der Revenio-Gruppe und repräsentieren die Marke iCare.

Nicht alle Produkte, Zubehör, Dienstleistungen oder Angebote sind auf allen Märkten zugelassen oder angeboten. Zugelassene Kennzeichnungen und Anweisungen können von Land zu Land unterschiedlich sein. Produktspezifikationen unterliegen Änderungen im Design und Lieferumfang und ergeben sich als ein Ergebnis laufender technischer Weiterentwicklungen.