






Guide rapide



icare

Démarrage du tonomètre et chargement de la sonde

1. Pour allumer le tonomètre, appuyez sur le bouton Sélection ou Mesure. Illustration des différentes méthodes de démarrage : (N'oubliez pas d'utiliser la lanière.)

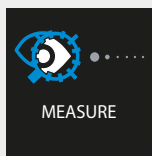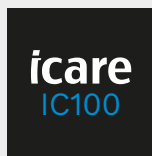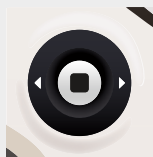

Appui sur le bouton Sélection pour démarrer.

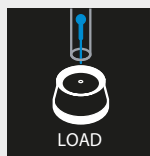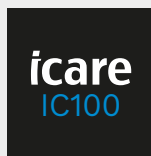

Appui sur le bouton Mesurer pour démarrer.


2. Ouvrez le tube de la sonde en retirant l'embout et en insérant la sonde dans son support comme indiqué sur l'image.





3. Lorsque le symbole Play s'affiche sur l'écran, le tonomètre est prêt à effectuer une mesure.



4. Demandez au patient de se détendre et de fixer un point précis droit devant lui. Approchez le tonomètre de l'œil du patient.

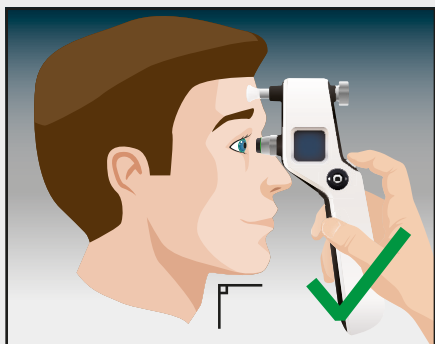

5. Tenez la sonde horizontale et perpendiculaire par rapport au centre de la cornée. La distance entre l'extrémité de la sonde et la cornée du patient doit être de 4-8 mm (5/32 - 5/16 pouce). Le témoin sur le support de la sonde doit être vert.

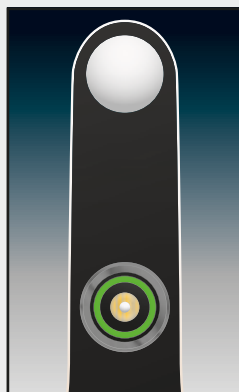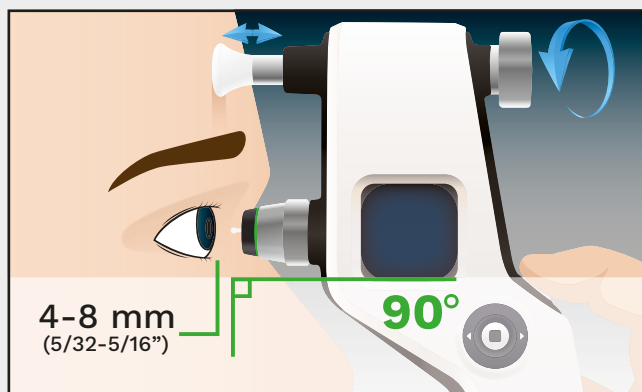

Témoin lumineux vert sur le support de la sonde

6. Appuyez sur le bouton Mesure pour mesurer la PIO. La sonde entre en contact avec l'œil au cours de la mesure : maintenez le bouton Mesurer appuyé pour effectuer 6 mesures d'affilée OU appuyez brièvement sur le bouton 6 fois pour effectuer 1 mesure à la fois.



Un bip bref

Indique une mesure unique correcte.


Un double bip

Indique une mesure unique incorrecte. (Se reporter aux messages d'erreurs du manuel complet).

Un bip long

Indique que six mesures réussies ont été effectuées et le résultat PIO s'affiche sur l'écran.

Affichage pendant la mesure

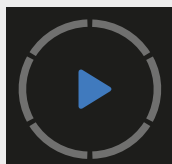

Avant




Après la deuxième mesure



Après la sixième mesure




Après la sixième mesure mais avec une variation acceptable

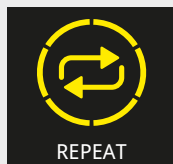

Après la sixième mesure mais avec trop de variations

Composants du tonomètre

1. Roulette de réglage du support du front
2. Écran
3. Bouton de mesure
4. Bouton de sélection
5. Support du front
6. Support de la sonde et témoin du support de sonde
7. Collier
8. Boutons de navigation

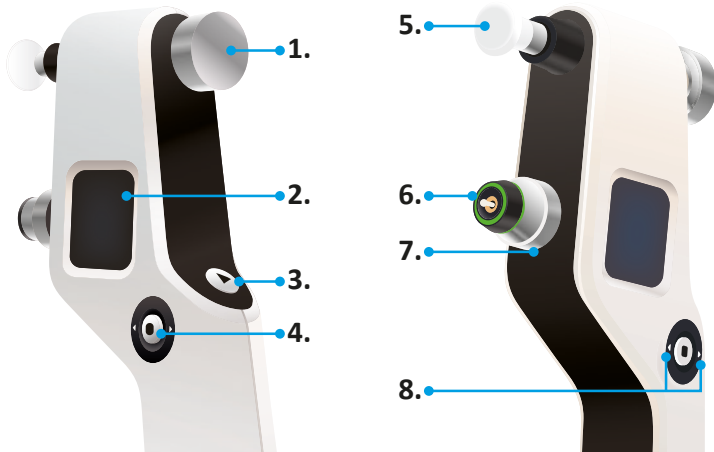

Remplacement du support de la sonde

1. Éteignez le tonomètre.
2. Dévissez le collier du support de la sonde à la main et placez-le dans un endroit sûr.
3. Retirez le support du tonomètre à l'aide du pouce et des doigts.
4. Introduisez un autre support dans le tonomètre.
5. Vissez le collier jusqu'à ce qu'il bloque fermement le support de la sonde.



Icare Finland Oy

Äyritie 22

01510 Vantaa, Finlande

Tél. +358 9 8775 1150

info@icare-world.com



Pour des informations plus détaillées, consultez le mode d'emploi.

www.icare-world.com

icare

iCare est une marque déposée d'Icare Finland Oy, Centervue S.p.A., Icare Finland Oy et Icare USA Inc. font partie du groupe Revenio et représentent la marque iCare. Certains produits, services ou offres référencés dans cette brochure ne sont pas approuvés ou proposés sur tous les marchés. De plus, l'étiquetage et les instructions approuvés peuvent varier d'un pays à l'autre. Les caractéristiques des produits peuvent subir des modifications en termes de conception et de contenu de livraison, ou suite aux développements techniques continus.